

PROTEZĂ DE ȘOLD

Proteză modulară pentru dezarticulație de șold

Ref. SRT 954

Indicații

Se utilizează în cazul amputației cu dezarticulație de șold sau hemipelvectomie.

Descriere


Proteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual și este compusă din:

- cupă din rășină sintetică de uz medical (proteza definitivă), căptușită cu spumă de polietilenă de 3 mm
- structură tubulară din duraluminu sau oțel inox
- articulație de șold mobilă
- articulație de genunchi blocabilă, cu frână (mecanică sau hidraulică) sau liberă (mecanică sau hidraulică)
- articulație de gleznă metalică, fixă
- picior flexibil din poliuretan.

Cosmetizarea protezei se realizează din spumă poliuretanică modelată conform configurației anatomice a membrului opus.



Detalii produs

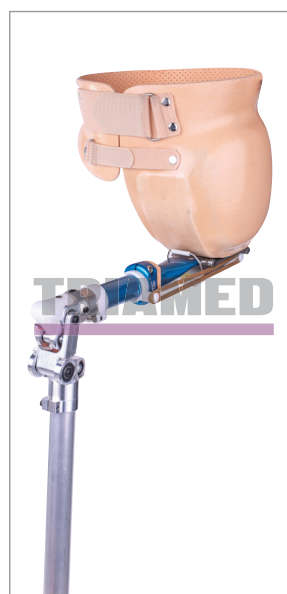

- articulație de șold mobilă
- articulație de genunchi blocabilă, cu frână (mecanică sau hidraulică) sau liberă (mecanică sau hidraulică)
- articulație de gleznă metalică, fixă



- Culoare disponibilă:
bej

Mărimi disponibile după măsurători individuale