

PROCONFORT

Corset lombo sacral

Ref. SRT 102

Indicații

Se utilizează în caz de hernii de disc incipiente, lombalgii, post intervenții chirurgicale, în caz de osteoporoză, pentru susținerea coloanei lombare.

Descriere

Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

- 4 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona lombară
- 2 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona abdominală (poziționate oblic pentru a permite flexia coapsei pe abdomen)
- 2 benzi elastice de 6 cm, situate în jurul taliei, care asigură stabilitate și compresie
- o pelotă realizată din material termoformabil, la nivel lombar, pentru păstrarea căldurii locale și protejarea zonei. Forma, relieful și punctele de presiune ale pelotei realizează un efect de masaj în zona lombară. Pelota este detașabilă și se poate poziționa în funcție de nevoie.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: anterior 16 cm, posterior 27,5 cm.


Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

Cele 6 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

Compoziție

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

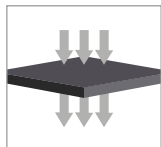

transfer de aer




Detalii produs



- benzi ajutătoare pentru o aplicare cât mai ușoară



- forma, relieful și punctele de presiune ale pelotei realizează un efect de masaj în zona lombară.

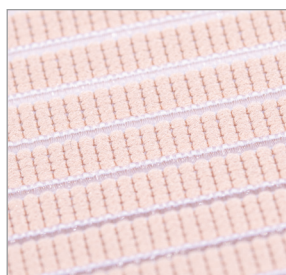


- material textil elastic cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri



- Culori disponibile: negru, bej

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Referință	SRT102M1	SRT102M2	SRT102M3	SRT102M4	SRT102M5	SRT102M6

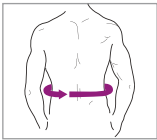

Se măsoară circumferința taliei