

AEROTEC TLS

Corset toraco lombo sacral

Ref. SRT 131

Indicații

Se utilizează în caz de hernii de disc, lombalgii, post intervenții chirurgicale, osteoporoză, susținerea coloanei toracolumbosacrale.

Descriere

Este realizat din material textil rigid, care permite circulația aerului, prevăzut cu:

- 2 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona lombară
- 2 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona abdominală (poziționate oblic pentru a permite flexia coapsei pe abdomen)
- 4 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susținere
- 2 benzi elastice de 5,5 cm care asigură compresie la nivel lombar
- 2 benzi elastice de 5,5 cm ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace.

Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime - anterior 16 cm, posterior - înălțimea corsetului variază între 53 - 55,5 cm, în funcție de mărime.


Cele 2 atele laterale și cele 2 atele paravertebrale din material plastic stabilizează coloana toracolumbară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând astfel tensiunea musculară și durerea.

Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectează prin tracțiune poziția trunchiului.


Compoziție

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

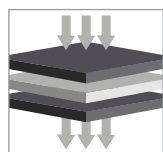

transfer de aer

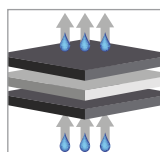

transfer de apă



Detalii produs



- manșoane pentru protecție axilară



- închiderea se face anterior cu scai



- plasă spațializată 3D



- Culoare disponibilă:
bej

Ref. SRT 131

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Înălțimea corsetului în zona posterioară (cm)	53	53	54	54	55,5	55,5
Referință	SRT131M1	SRT131M2	SRT131M3	SRT131M4	SRT131M5	SRT131M6

Se măsoară circumferința taliei

