

## THERMO H-LEG 01

Orteză de șold genunchi gleznă picior

Ref. SRT 715

### Indicații

Se utilizează ca tratament ortopedic în cazul maladiei Legg - Calvé - Perthes, pentru descărcarea articulației coxo-femorale.

### Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil și este prevăzută cu 2 articulații metalice laterale mobile, blocabile în timpul mersului.


Fixarea ortezei se face cu 4 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.

Pentru echilibrarea bazinului este necesară înălțarea tălpii pantofului de pe partea opusă.



### Detalii produs

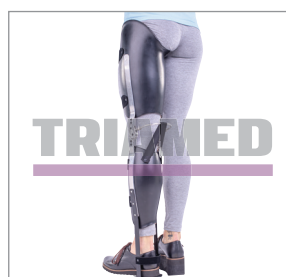

- pentru echilibrarea bazinului este necesară înălțarea tălpii pantofului de pe partea opusă



- fixarea ortezei se face cu 4 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale