

# TRIASPORT


## THORATEX 04

Orteză toracică rigidă

Ref. SRT 140

### INDICAȚII

Se utilizează pentru corectarea pozițiilor vicioase ale coloanei toracale, fractură de claviculă.

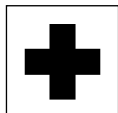

MEDICAL



SPORT



ZILNIC

### DESCRIERE

Orteză cu design anatomic realizată din 3 benzi de fixare din material textil, rigide:

- 2 benzi care înconjoară umerii, corectând prin tracțiune poziția trunchiului
- o bandă este situată posterior, folosind la reglarea intensității tracțiunii.

Toate cele 3 benzi sunt reglabile. Pentru scurtarea benzilor, se îndepărtează scaiul tip "crocodil" de pe extremități, se taie banda la lungimea optimă pe semnele transversale prefigurate și se re poziționează scaiul. Cele 2 benzi care înconjoară umerii sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară. Orteza este confecționată dintr-un material moale, care nu se întinde (rigid) și nu deranjează în timpul purtării. Suprafața mare pe care se poate fixa scaiul permite un reglaj și o tracțiune foarte bună, ceea ce ajută la revenirea claviculei la forma anatomică în caz de fractură. Pentru a avea efect se reajustează în timpul purtării. Închiderea se face cu scai.

### COMPOZIȚIE

Materialul textil rigid compus din poliamidă are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.

### CULORI DISPONIBILE

Negru



### MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală  
Pentru circumferința toracelui între 75 - 135 cm.



MĂRIME

