

GEROMED 02

Orteză de genunchi mobilă deschisă posterior

Ref. SRT 340

Indicații

Se utilizează în caz de entorse, luxații, după fracturi consolidate, procese inflamatorii, instabilitate laterală a articulației genunchiului. Se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

Descriere

Orteză deschisă posterior, realizată din material textil, prevăzută cu:

- o bandă elastică cu silicon (10mm) antialunecare, în interiorul părții superioare
- 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte
- suport patelar (spumă polietilenă)
- 3 benzi de fixare din neopren: 2 benzi se închid anterior și una se închide posterior
- 2 benzi de fixare din scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei.

Lungime: 32 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte, asigurând stabilitate și siguranță la utilizare. Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei.

Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.



- Culoare disponibilă: negru

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5
Circumferința genunchiului (cm)	33-36	36-39	39-42	42-45	45-49
Referință	SRT340M1	SRT340M2	SRT340M3	SRT340M4	SRT340M5

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei




Detalii produs



- orteză deschisă posterior
- benzi de fixare cu scai



- suport patelar din spumă de polietilenă

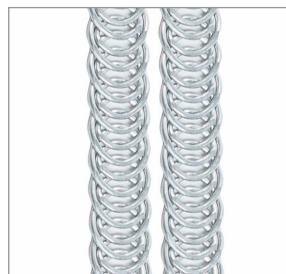

- atele metalice flexibile

