

THORATEX 02 JUNIOR

Orteză toracică rigidă

Ref. SRT 126

Indicații

Se utilizează pentru corectarea pozițiilor vicioase ale coloanei toracale, fractură de claviculă.

Descriere


Este realizată din material textil moale, care nu se întinde (rigid) și nu deranjează în timpul purtării, prevăzută cu:

- o componentă posterioară care sprijină coloana toracală
- 2 benzi rigide care înconjoară umerii, corectând prin tracțiune poziția trunchiului. Cele 2 benzi se poziționează peste capul humerusului și sunt reglabile prin tăiere.

Pentru scurtarea benzilor, se îndepărtează scaiul tip "crocodil" de pe extremități, se taie banda la lungimea optimă pe semnele transversale prefigurate și se rezonează scaiul. Suprafața mare de scai de la nivelul celor 2 benzi de fixare permite un reglaj și o tracțiune foarte mare, ceea ce ajută la revenirea claviculei la forma anatomică în caz de fractură. Pentru a avea efect se reajustează în timpul purtării.

Compoziție

Orteza este realizată din materiale textile cașerate cu 2 și 3 straturi.

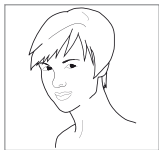

disponibil și
în varianta
pentru adulți



Product details



- orteză de mici dimensiuni ce poate fi utilizată ușor sub îmbrăcăminte
- închiderea se face anterior cu scai



- reglarea benzilor se face prin tăiere



- Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile

Mărime universală

Pentru circumferința toracelui între 45 - 75 cm