

GEROMED 01

Orteză de genunchi mobilă

Ref. SRT 318

Indicații

Se utilizează în caz de entorse, luxații, după fracturi consolidate, în caz de instabilitate laterală a articulației genunchiului, procese inflamatorii.
Se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

Descriere

Orteză deschisă posterior, realizată din material textil, prevăzută cu:

- o bandă elastică cu silicon (10mm) antialunecare, în interiorul părții superioare
- 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte
- suport patelar (spumă polietilenă).


Închiderea se face posterior cu scai.

Lungime: 26 cm.


Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte, asigurând stabilitate și siguranță la utilizare. Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere.

Compoziție

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

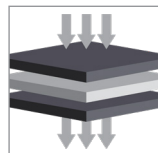

transfer de aer

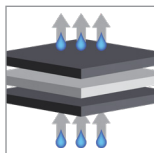

transfer de apă



- Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5
Circumferința genunchiului (cm)	33-36	36-39	39-42	42-45	45-49
Referință	SRT318M1	SRT318M2	SRT318M3	SRT318M4	SRT318M5

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei




Detalii produs



- orteză deschisă posterior
- benzi de fixare cu scai



- suport patelar din spumă de polietilenă

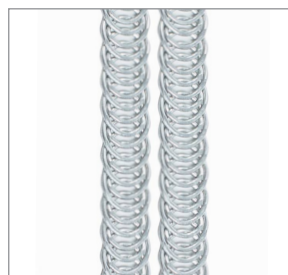

- atele metalice flexibile

