

STOMATEX

Corset abdominal pentru stoma

Ref. SRT 106

Indicații


Se utilizează după intervenții chirurgicale la nivel abdominal, în cazul persoanelor cu colostome/urostome.

Descriere

Este realizat din material textil elastic și material textil rigid. Componenta anterioară rigidă este prevăzută cu un decupaj pentru sacul de colostomie, realizat dintr-un inel de polietilenă de 25 mm lățime și diametru interior de 75 mm. Închiderea se face anterior cu scai. Lățime: 24 cm. Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului. Este un corset tradițional semirigid care, datorită componentei posterioare elastice, permite o respirație toracoabdominală normală.


Compoziție

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

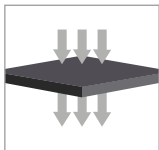


transfer de aer

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

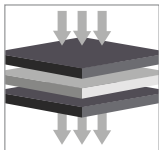

transfer de aer

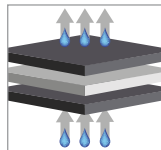

transfer de apă



Culori disponibile:  
negru, bej



Detalii produs



- corset tradițional semirigid care asigură o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită
- poziționarea sacului de colostomie



- material textil elastic
- material textil rigid

Mărimi disponibile

| Mărimi                    | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Circumferința taliei (cm) | 65-75    | 75-85    | 85-95    | 95-105   | 105-115  | 115-125  |
| Referință                 | SRT106M1 | SRT106M2 | SRT106M3 | SRT106M4 | SRT106M5 | SRT106M6 |

Se măsoară circumferința taliei

