

THORATEX 02

Orteză toracică rigidă

Ref. SRT 113

Indicații

Se utilizează pentru corectarea pozițiilor vicioase ale coloanei toracale, fractură de claviculă.

Descriere


Este realizată din material textil moale, care nu se întinde (rigid) și nu deranjează în timpul purtării, prevăzută cu:

- o componentă posterioară care sprijină coloana toracală
- 2 benzi rigide care înconjoară umerii, corectând prin tracțiune poziția trunchiului. Cele 2 benzi se poziționează peste capul humerusului și sunt reglabile prin tăiere.

Pentru scurtarea benzilor, se îndepărtează scaiul tip "crocodil" de pe extremități, se taie banda la lungimea optimă pe semnele transversale prefigurate și se re poziționează scaiul. Suprafața mare a celor 2 benzi pe care se poate fixa scaiul permite un reglaj și o tracțiune foarte mare, ceea ce ajută la revenirea claviculei la forma anatomică în caz de fractură. Pentru a avea efect se reajustează în timpul purtării.

Compoziție

Materiale textile cașerate cu 2 și 3 straturi.

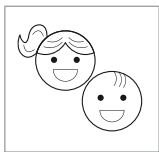

disponibil și
în varianta junior



• Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile

Mărime universală


Pentru circumferința toracelui între 75 - 135 cm



Detalii produs



- orteză de mici dimensiuni ce poate fi utilizată ușor sub îmbrăcăminte

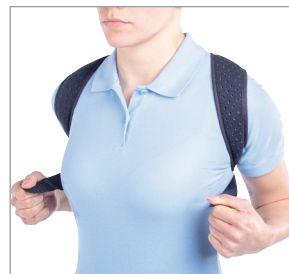


- închiderea se face anterior cu scai, peste capul humerusului, la nivelul benzilor rigide de tracțiune



- reglarea benzilor se face prin tăiere

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT308M1	SRT308M2	SRT308M3	SRT308M4	SRT308M5	SRT308M6	SRT308M7	SRT308M8

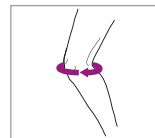

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei