

TLS 01

Corset toraco lombo sacral

Ref. SRT 117

Indicații

Se utilizează în caz de hernii de disc, lombalgii, post intervenții chirurgicale, osteoporoză, susținerea coloanei toracolumbosacrale.

Descriere

Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

- 2 atele laterale din material plastic, pentru susținere
- 2 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susținere
- 2 benzi elastice care asigură compresie sporită la nivel lombar
- 2 benzi elastice ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime - anterior 16 cm, posterior - înălțimea corsetului variază între 48 - 53 cm, în funcție de mărime.


Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

Cele 2 atele laterale și cele 2 atele paravertebrale lungi stabilizează regiunea toracolumbară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.


Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectează prin tracțiune poziția trunchiului. Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

Compoziție

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

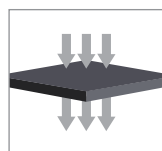

transfer de aer

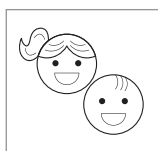

disponibil și în varianta junior




- Culori disponibile: negru, bej



Detalii produs



- închiderea se face anterior cu scai
- manșoane pentru protecție axilară

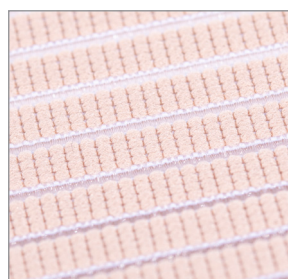

- material textil elastic cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Înălțimea corsetului în zona posterioară (cm)	48	49	50	51	52	53
Referință	SRT117M1	SRT117M2	SRT117M3	SRT117M4	SRT117M5	SRT117M6

Se măsoară circumferința taliei

