

TLS 01 JUNIOR

Corset toraco lombo sacral

Ref. SRT 128

Indicații

Se utilizează după intervenții chirurgicale sau pentru susținerea coloanei toracolombare în caz de cifoză și scolioză toracolombosacrală.

Descriere

Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

- 2 atele laterale din material plastic, pentru susținere
- 2 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susținere
- 2 benzi elastice care asigură compresie sporită la nivel lombar
- 2 benzi elastice ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.


Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime - anterior 16 cm, posterior - înălțimea corsetului variază între 30 - 45 cm, în funcție de mărime.

Cele 2 atele laterale și cele 2 atele paravertebrale lungi stabilizează regiunea toracolombară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea. Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectează prin tracțiune poziția trunchiului. Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

Compoziție

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

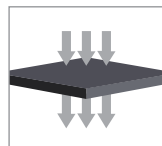

transfer de aer



disponibil și în varianta pentru adulți




- Culori disponibile: negru, bej



Product details



- benzi elastice ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace
- manșoane pentru protecție axilară

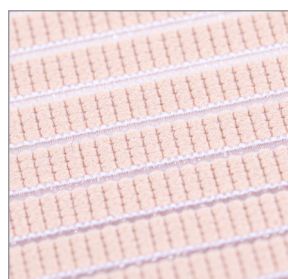

- material textil elastic cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	44-51	44-51	51-58	51-58	58-65	58-65
Înălțimea corsetului în zona posterioară (cm)	30	35	35	40	40	45
Referință	SRT128M1	SRT128M2	SRT128M3	SRT128M4	SRT128M5	SRT128M6

Se măsoară circumferința taliei

